


Guía de Fotografía Clínica Dental para uso de la cámara de la CLUO

CONFIGURACIÓN FIJA DE CÁMARA

Estos valores **NO DEBEN MODIFICARSE** salvo los indicados.

- **Modo de disparo:** Manual (M)
- **Velocidad de obturación:** 1/125
- **ISO:** 100
- **Flash:** Activado en modo ETTL
- **Apertura (F):** único valor que moveremos
 - f/11 para fotografías extraorales
 - f/29 para fotografías intraoral
 - La apertura se ajusta directamente desde la **pantalla táctil** de la cámara, pulsando en el recuadro dentro del círculo rojo.

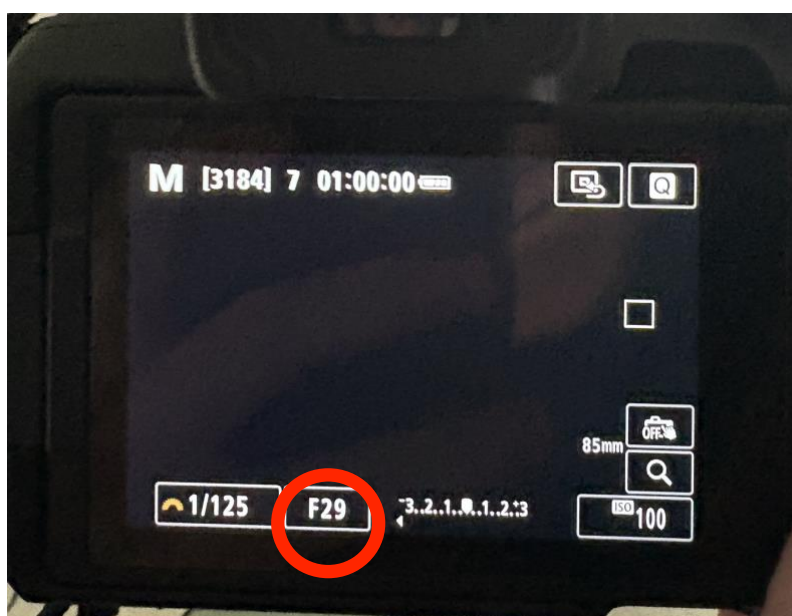

COMPENSACIÓN DEL FLASH

El flash funciona en modo ETTL (automático), pero permite ajustar la exposición desde -3 hasta +3 en pasos de 1/3.

Este ajuste **es el único que el alumno podrá modificar durante el uso.**

La compensación se ajusta desde el panel del flash utilizando el botón central (SEL/SET) y la rueda que rodea al botón. Se indica con un círculo rojo en la imagen.



- Si la imagen está oscura → subir exposición (+1, +1.3, +2...)
- Si la imagen está muy clara → bajar exposición (-1, -1.3, -2...)

FOTOGRAFIAS EXTRAORALES

- Apertura: f/11
- Enfoque en los ojos
- Fondo neutro y mate
- La fotografía debe incluir cuello y parte superior del tórax
- En sonrisa, se debe pedir una expresión natural (no una sonrisa social)

FOTOGRAFIAS INTRAORALES

- Apertura: f/29
- Enfoque en caninos o incisivos centrales
- Cavidad oral limpia y sin saliva visible
- Separadores bien colocados, tirando hacia los lados y hacia adelante
- Para oclusales, el paciente debe estar reclinado, se debe usar espejo y retirar el labio con el separador
- Las imágenes con espejo deben voltearse horizontalmente durante el postprocesado

PROTOCOLO FLUJO DE TRABAJO DE FOTOGRAFÍA DENTAL CLUO

