



Universidad de Oviedo

PROTOCOLO DE TRABAJOS DIGITALES

Clínica Universitaria de Odontología

INFORMACION ADMINISTRATIVA

Laboratorio de envío: Laboratorio DentalASTUR SL


Escáner Intraoral: Medit 700

Nombre del Usuario: CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGIA

Correo: cluo.flujodigital@gmail.com



Contraseña: Odonto2014.

PROTOCOLO DE ESCANEADO INTRAORAL Y ENVÍO AL LABORATORIO “*DentalAstur*”

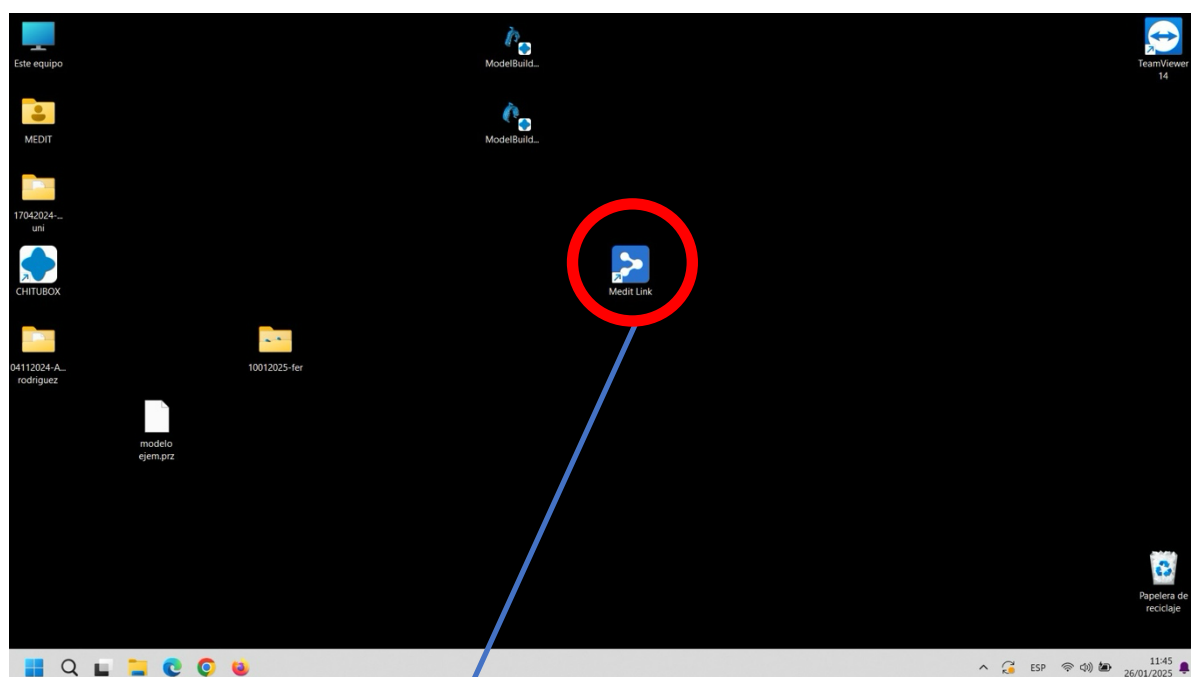

1º Clicamos en el icono de Meditlink, pero antes debemos de encender el escáner intraoral (parte posterior del equipo) y asegurarnos que el PC está conectado a la red wifi de Uniovi .


2º Una vez dentro nos aseguramos estar en la cuenta de “integrada de adultos y niños” para el envío de trabajos al laboratorio DentalAstur.

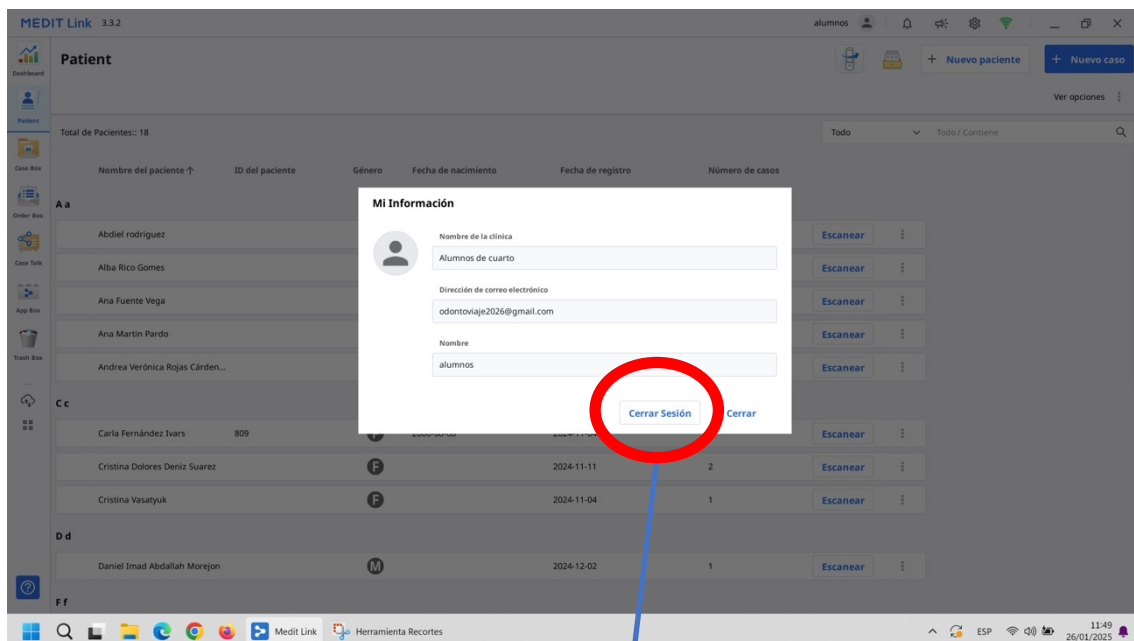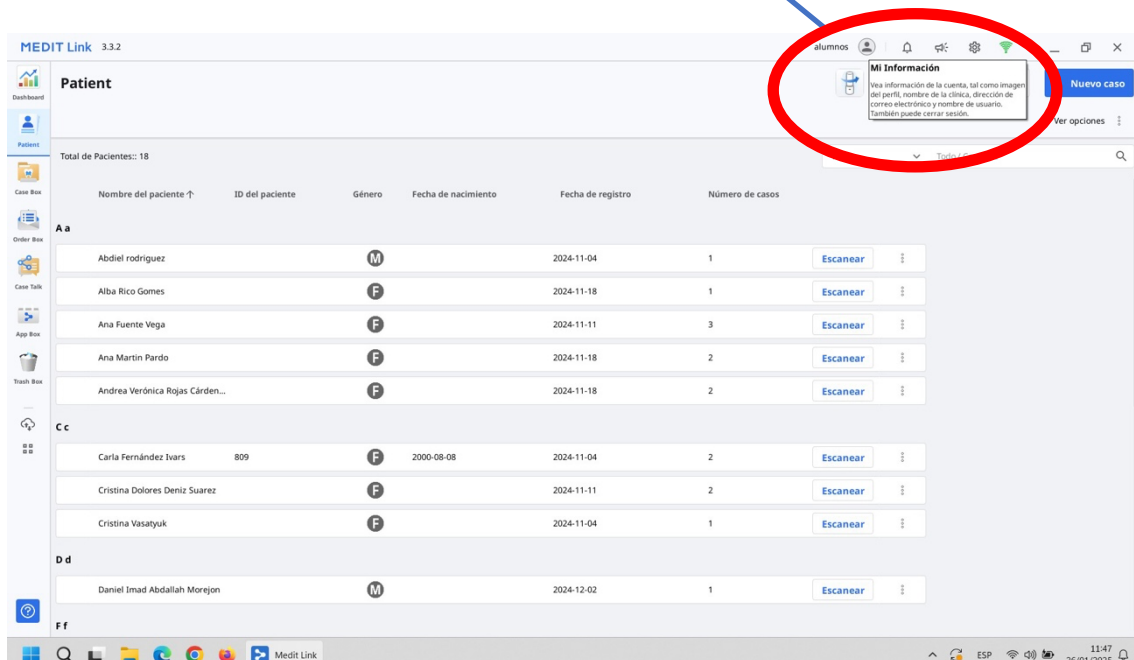


3. Confirmamos que estamos en nuestro usuario (ver datos del usuario en la primera página del pdf), de lo contrario clicamos en cerrar sesión

4. Al cerrar la sesión, tendremos que volver a clicar en MeditLink y nos aparecerá la pestaña de iniciar sesión y escribiremos nuestras credenciales de correo y contraseña (ver primera hora del pdf) y clicamos en iniciar sesion.

Nota: no dejar clicado el icono de “mantenerme conectado”

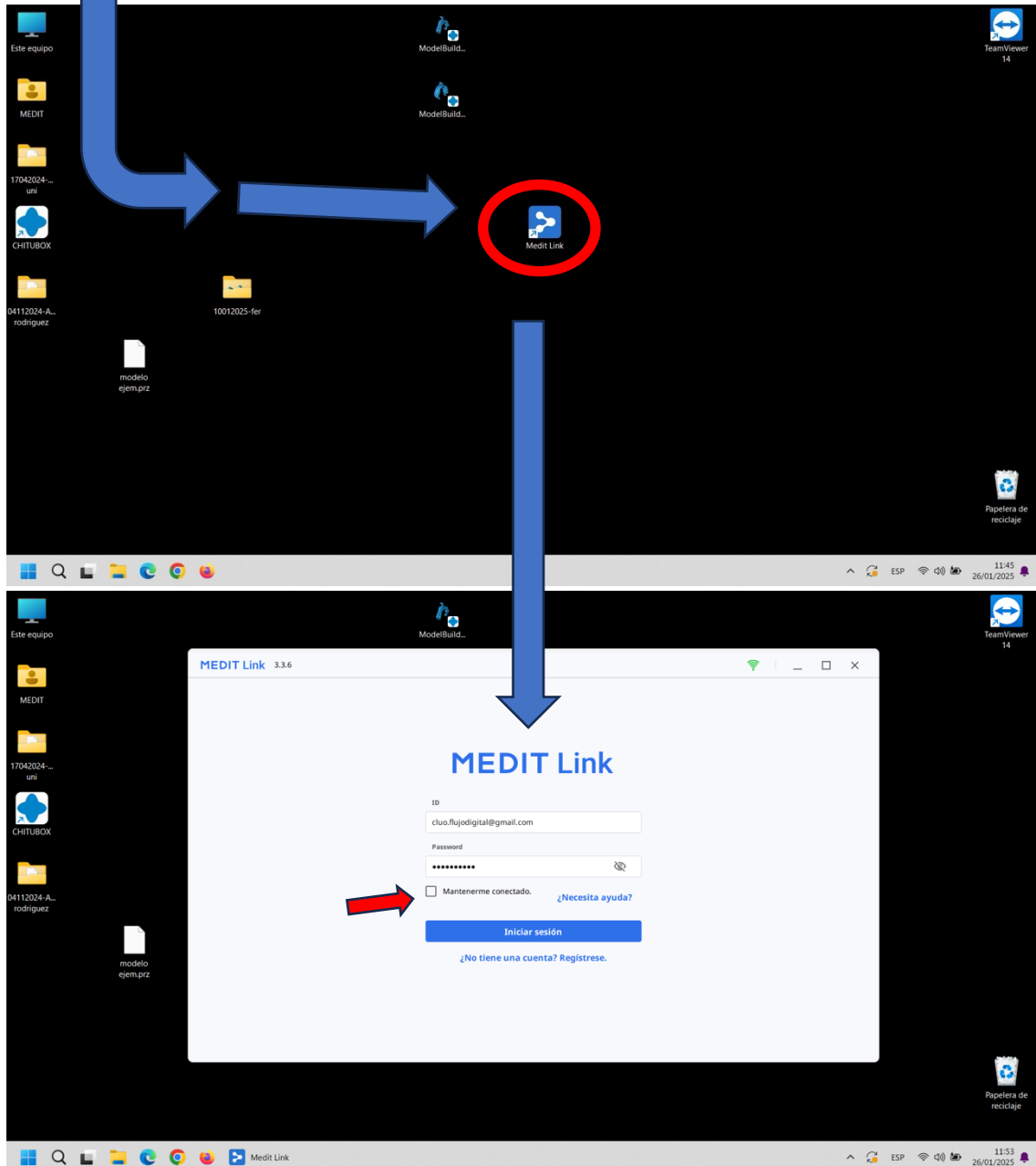


5. Una vez dentro de la aplicación MEDIT Link clicamos en el icono **“Patient”** y después en **“nuevo paciente”**

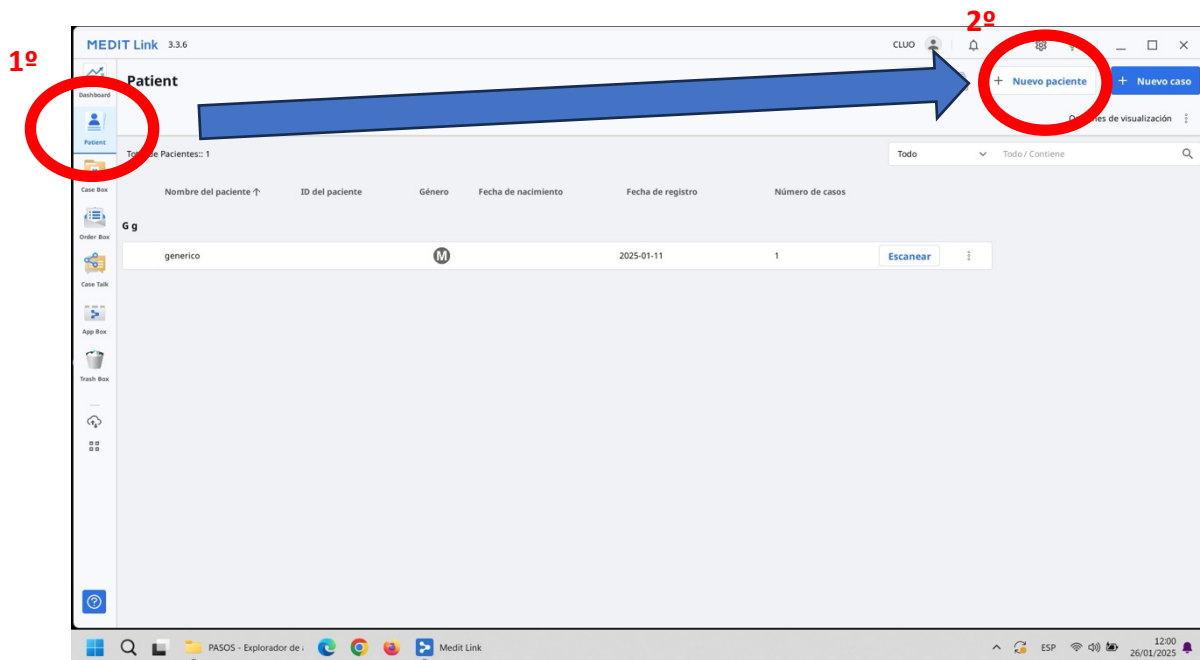


6. Creamos nuestro nuevo paciente donde tentemos que incluir:

- Nombre y apellidos
- Genero
- Fecha de nacimiento
- ID del paciente (su número de Historia)


Una vez cumplimentado clicamos en **“Guardar”**

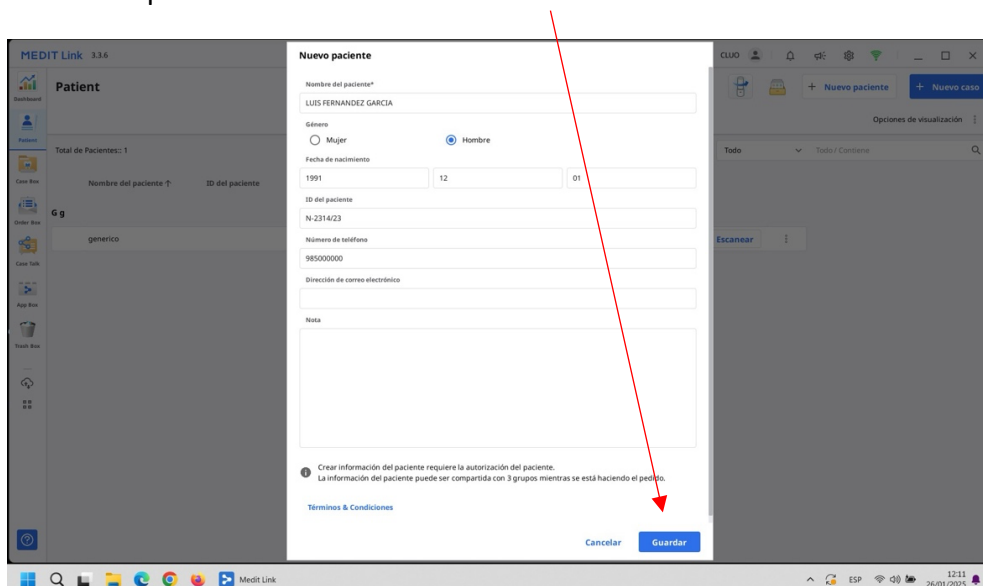

7. Una vez que hemos creado al nuevo paciente, clicamos en el paciente

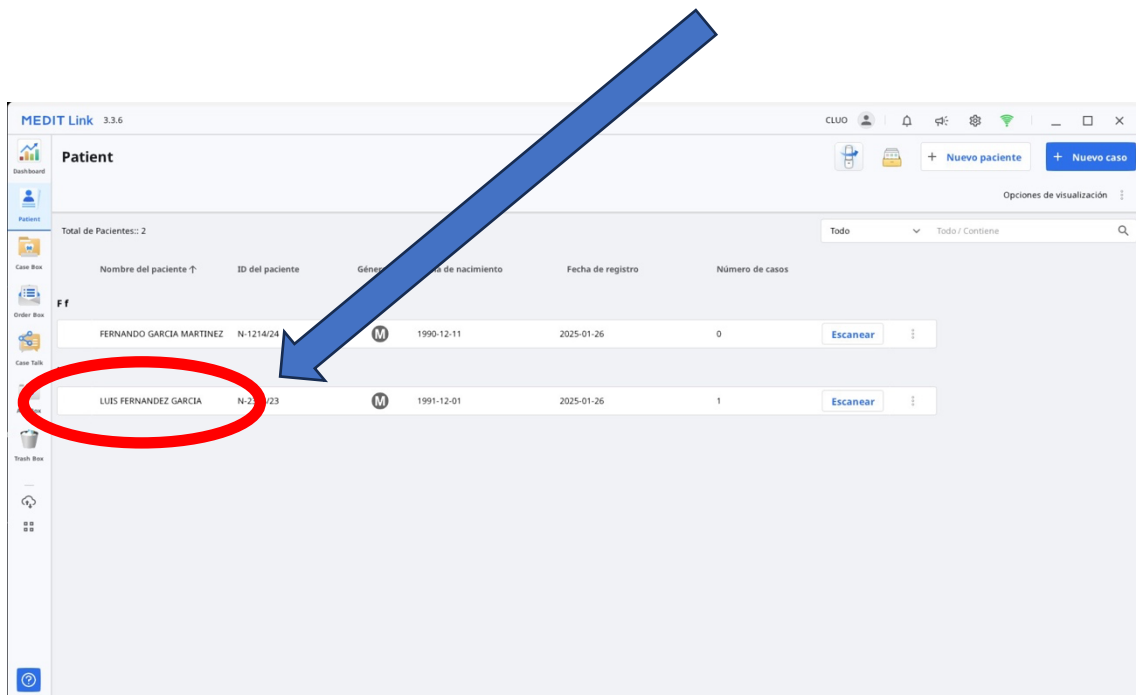

8. Tras lo cual clicaremos en “nuevo caso”

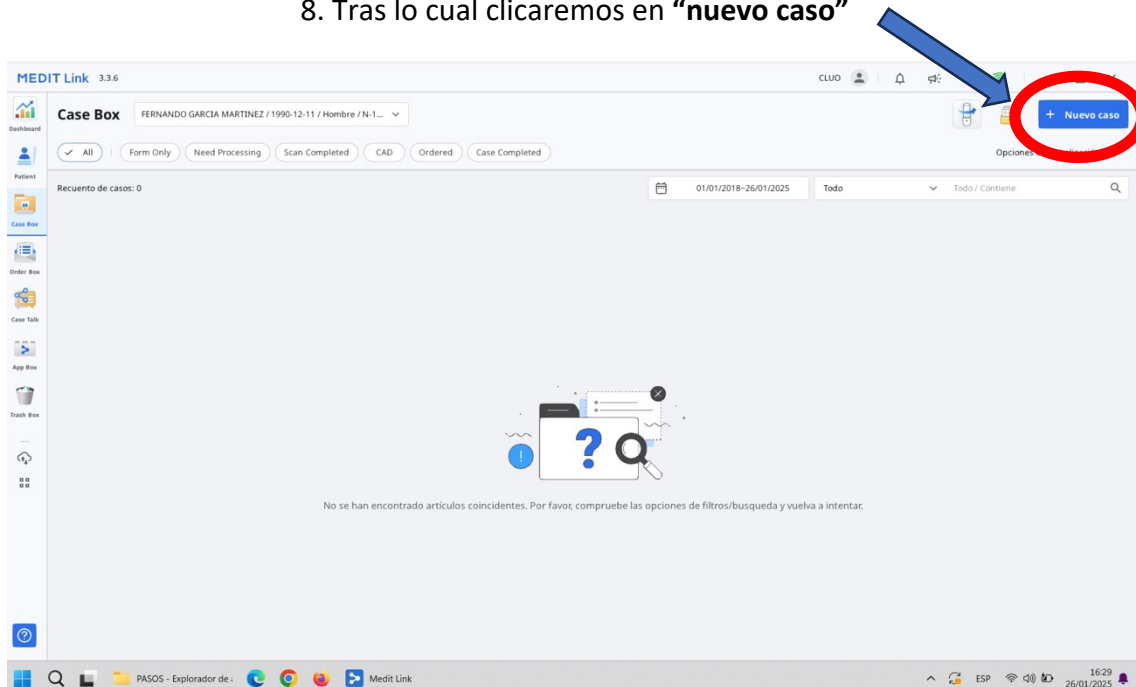

9. Seguidamente se nos abre una pantalla donde comprobaremos que es nuestro paciente en **“nombre del paciente”** y seguidamente escribiremos el nombre del caso ej: prótesis fija metal cerámica en 2.3 en **“nombre del caso”**

Información del nuevo caso

Nombre del paciente*
LUIS FERNANDEZ GARCIA

✓ 'LUIS FERNANDEZ GARCIA Hombre 19911201' está seleccionado.

Nombre del caso*
Caso de LUIS FERNANDEZ GARCIA

Crear información del paciente requiere la autorización del paciente.
La información del paciente puede ser compartida con 3 grupos mientras se está haciendo el pedido.

Etiquetas
Puede añadir la etiqueta introducida con Intro o la barra espaciadora.

Puede añadir hasta 10 etiquetas de 100 caracteres o menos.

[Términos & Condiciones](#)

Cancelar Registrar **Registrar y escanear**

Una vez cumplimentado clicamos en **“registrar y escanear”**

10. Una vez registrado **“el caso”** se inicia la descripción del mismo previo al escaneado. Primero deberemos indicar el/los diente/es y el **“tipo”** de tratamiento que se va a realizar ej. Corona, inlay...

Caso de LUIS FERNANDEZ GARCIA (LUIS FERNANDEZ GA...)

Formulario Visor de archivos

Form Only

Tipo Método Material Tono Favorito

Inlay	Onlay	Cofia	Cofia de prótesis dental
Corona	Pónico	Perno-mulón	Carilla
Corona de implante	Pilar personalizado	Guía quirúrgica	Subestructura con desplazamiento
Pilar personalizado + Corona de implante	Pilar personalizado + Cofia	Encerado diagnóstico	Prótesis parcial

Lista de pedidos


Núm.	Tipo	Método	Material	Tono
24	Tipo			

Dientes Arcada

Cancelar Guardar

Toda la información que vayamos poniendo nos saldrá en la lista de pedidos

11. Una vez elijamos el tipo de tratamiento tenemos que solicitar el tipo de “**Método**”
“tipo de estructura” elegiremos “PFM”

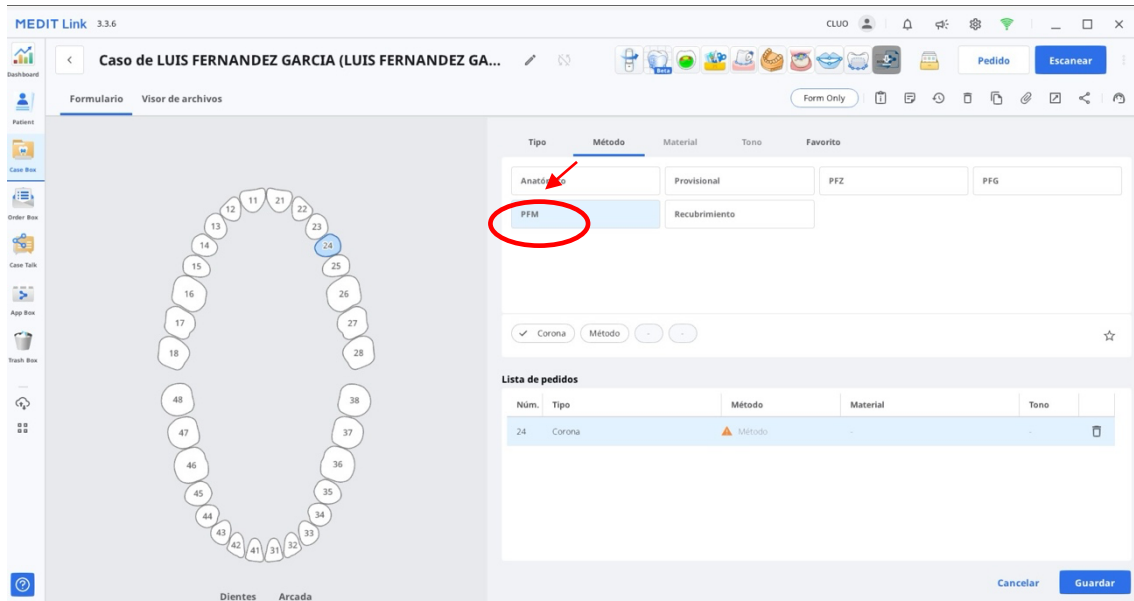

MEDIT Link 3.3.6

Caso de LUIS FERNANDEZ GARCIA (LUIS FERNANDEZ GA...

Formulario Visor de archivos

Tipo Método Material Tono Favorito

Anatómico Provisional PFZ PFG

PFM Recubrimiento


✓ Corona Método - -

Lista de pedidos

Núm.	Tipo	Método	Material	Tono
24	Corona	PFM	Provisional	PFZ

Cancelar Guardar

12. Indicaremos el tipo de material que en nuestro caso será Metal

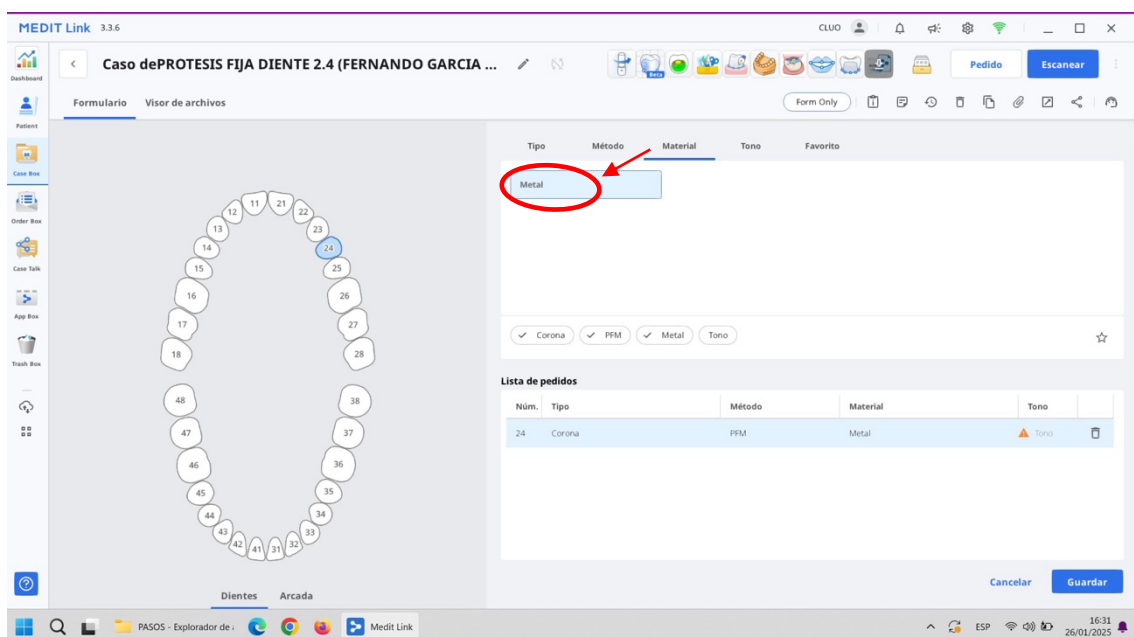

MEDIT Link 3.3.6

Caso dePROTESIS FIJA DIENTE 2.4 (FERNANDO GARCIA ...

Formulario Visor de archivos

Tipo Método Material Tono Favorito

Anatómico PFM Metal PFZ PFG

✓ Corona ✓ PFM ✓ Metal Tono

Lista de pedidos

Núm.	Tipo	Método	Material	Tono
24	Corona	PFM	Metal	PFZ

Cancelar Guardar


13. Indicaremos el “tono” color de la “porcelana”

The screenshot shows the MEDIT Link 3.3.6 software interface. The top bar displays the patient name 'Caso de LUIS FERNANDEZ GARCIA (LUIS FERNANDEZ GA...)' and various icons. The left sidebar contains navigation options like 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'App Box', and 'Trash Box'. The main area is divided into 'Formulario' and 'Visor de archivos' tabs. The 'Formulario' tab shows a dental arch diagram with teeth numbered 11 to 28. The right panel has tabs for 'Tipo', 'Método', 'Material', 'Tono', and 'Favorito'. The 'Tono' tab is selected and circled in red. Below the tabs is a grid of color swatches for 'VITA Classic Shade' with options like 'None Shade', 'A1', 'A2', 'A3', 'A3.5', 'A4', 'B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'C1', and 'C2'. There are also checkboxes for 'Corona', 'PFM', 'Metal', and 'Tono'. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

14. Una vez indicado el tono nos volverá al inicio del formulario indicándonos todo lo que hemos marcado en la “lista de pedidos”. Si esta correctamente indicado, clicamos en “guardar” y después en “Escanear”


The screenshot shows the same MEDIT Link 3.3.6 software interface. The 'Formulario' tab is still active. The 'Lista de pedidos' table is visible, showing one entry with 'Núm.' 24, 'Tipo' Corona, 'Método' PFM, 'Material' Metal, and 'Tono' A1. The 'Guardar' button at the bottom right is circled in red. A red arrow points from the 'Escanear' button at the top right to the 'Guardar' button. The 'Tono' tab is still selected, and the 'VITA Classic Shade' grid is visible.

Nota: Debemos tener encendidos el escáner intraoral de lo contrario nos saldrá esta pantalla hasta tener encendido el escáner. Una vez encendido le daremos a cancelar.


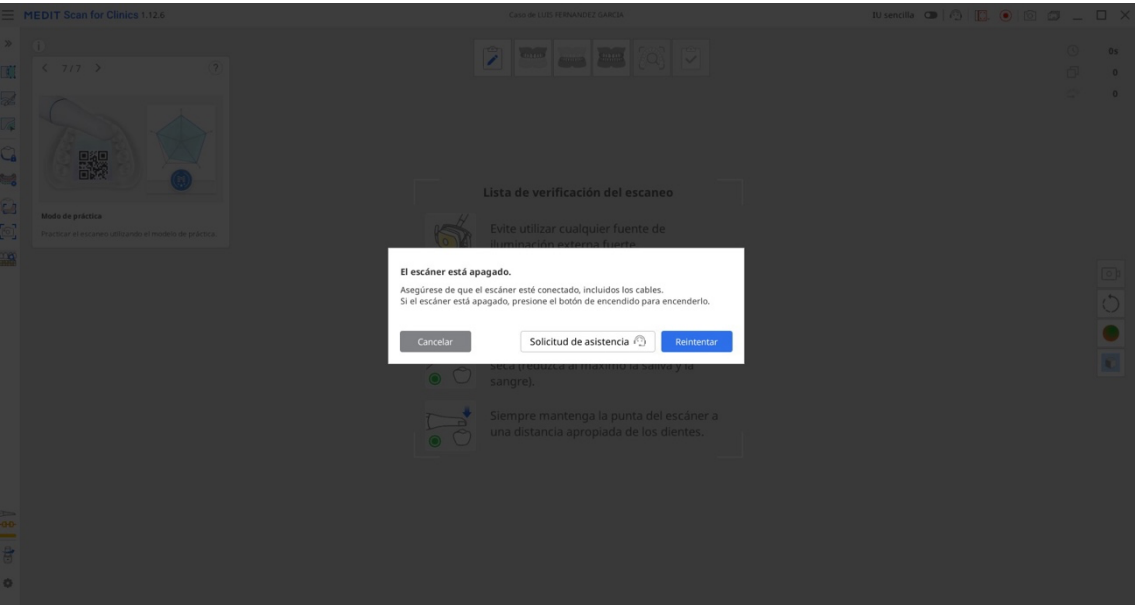


Nota: si quisiéramos borrar toda la prescripción deberemos:


1. Volver para atrás

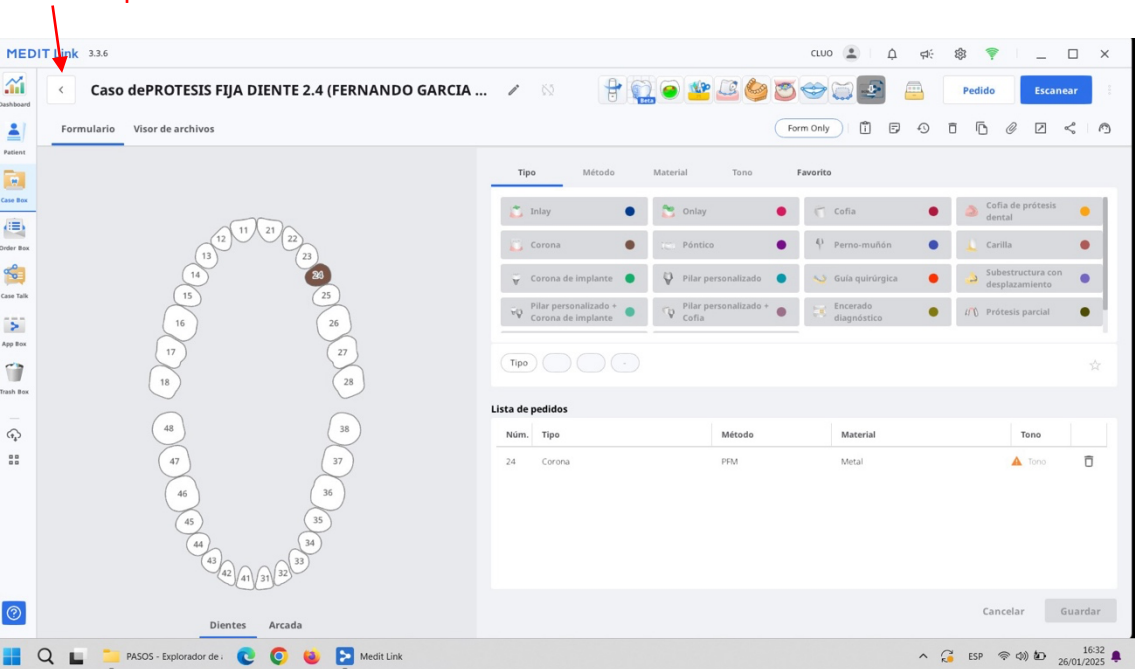


Clicar en el **paciente** y después clicar en **borrar** y nos dirá que si queremos borrar el caso y le daremos **“aceptar”**

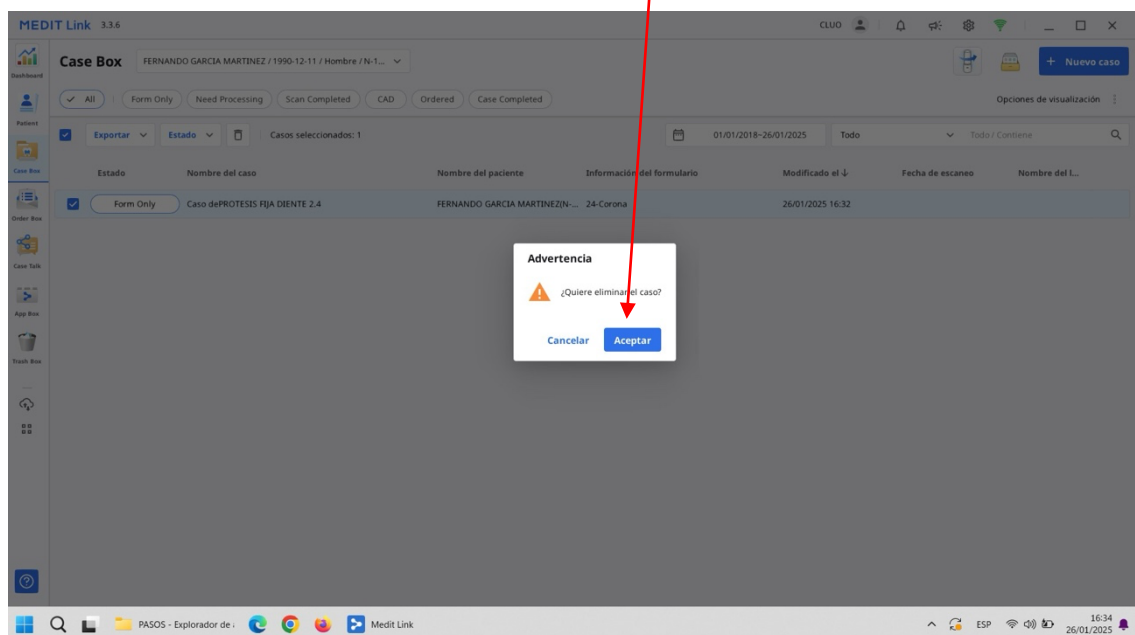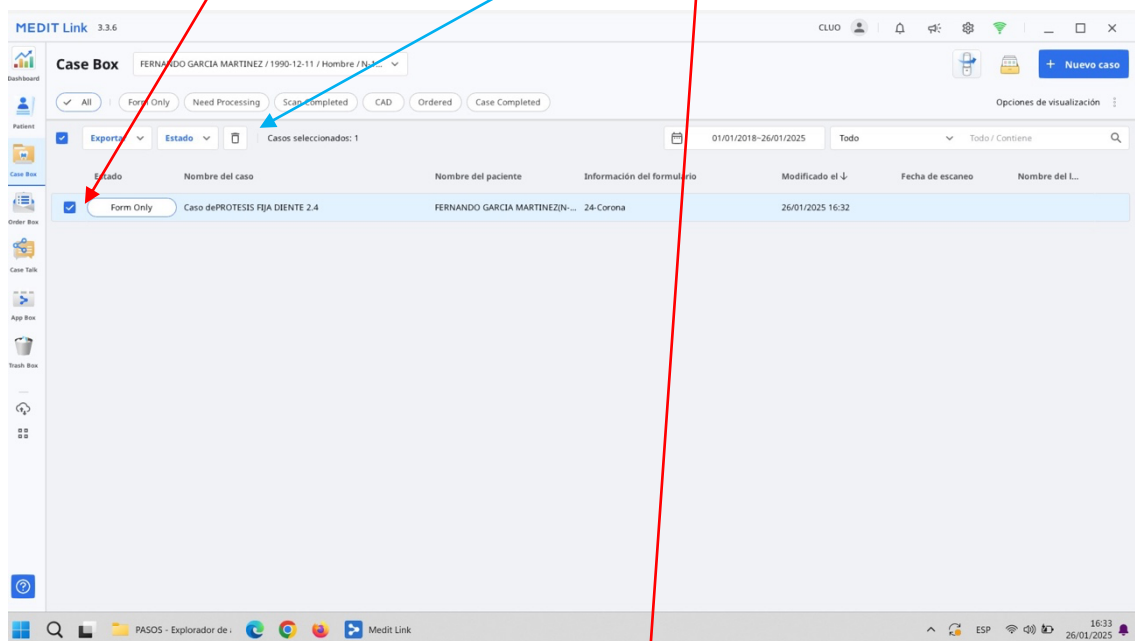


14. En este momento iniciaremos el escaneo del caso empezando por la arcada superior en la cual clicaremos para empezar el escaneo.

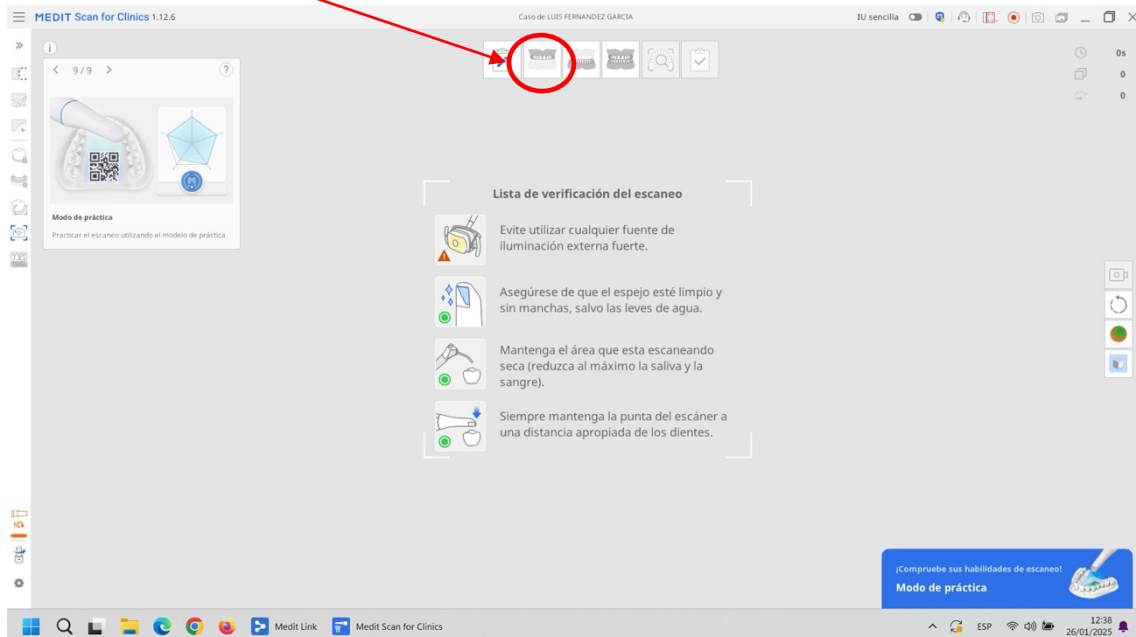


15. Una vez escaneada la arcada superior, clicaremos para empezar el escaneo de la arcada inferior

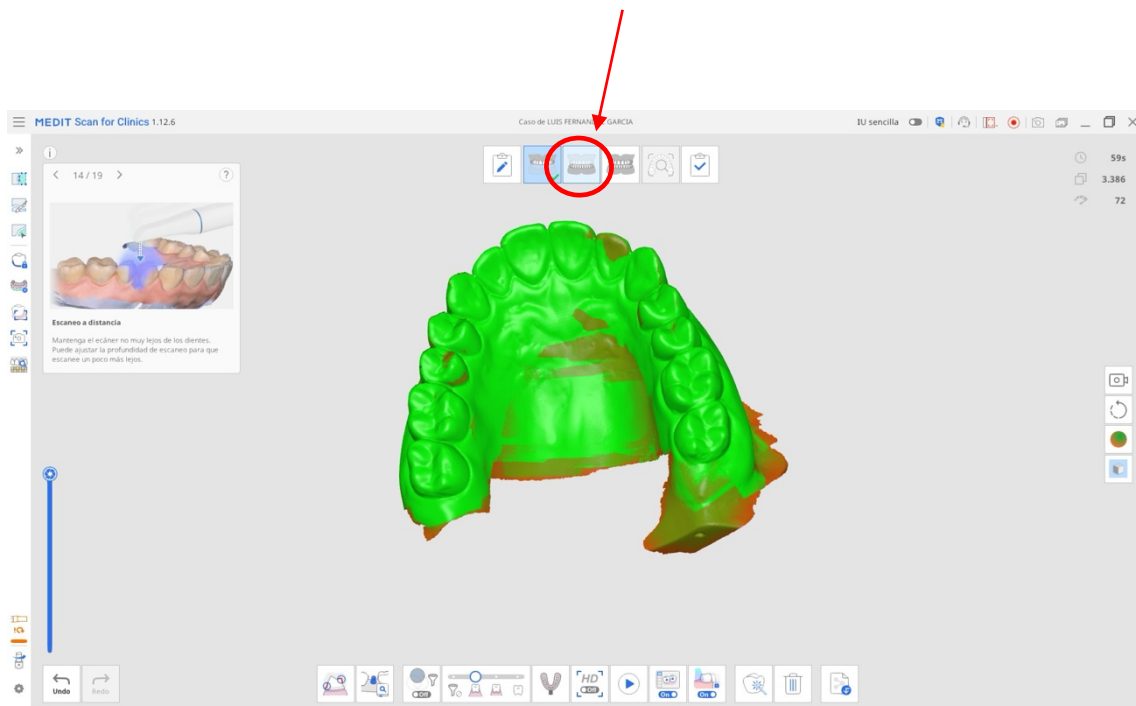

16. El último paso del escaneado será la relación interarcada

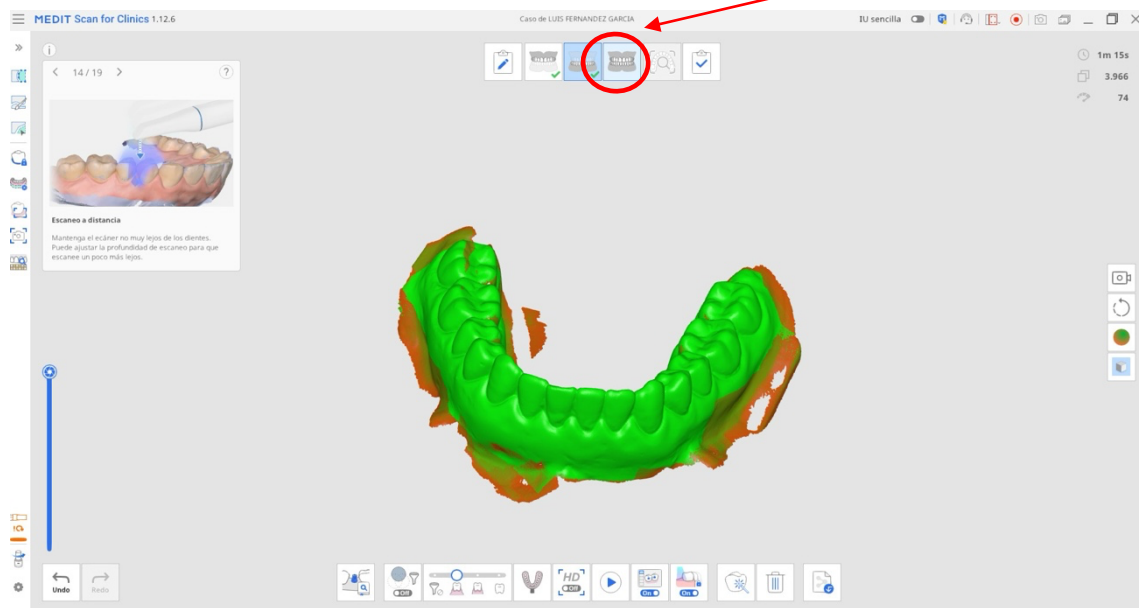


17. Una vez obtenida la relación interarcada clicaremos en finalización del escaneado

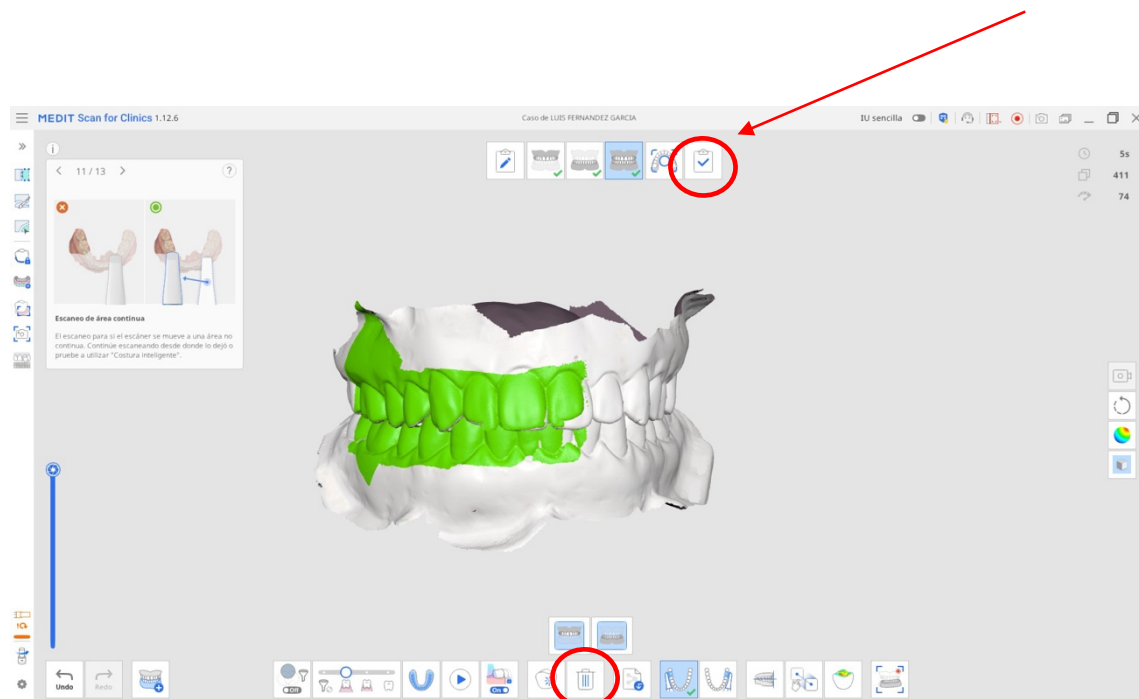


NOTA: SI ALGUN ESCANEADO RESULTARA INCORRECTO PODEMOS ELIMINAR EL ESCANEADO (ARCADA SUPERIOR O INFERIOR O RELACION INTERARCADA EN EL ICONO PAPELERA)


18. Al clicar en finalizar el escaneado nos aparecerá esta ventana donde nos pregunta si queremos escanear algún elemento más. Debemos clicar en **“No, Gracias”**

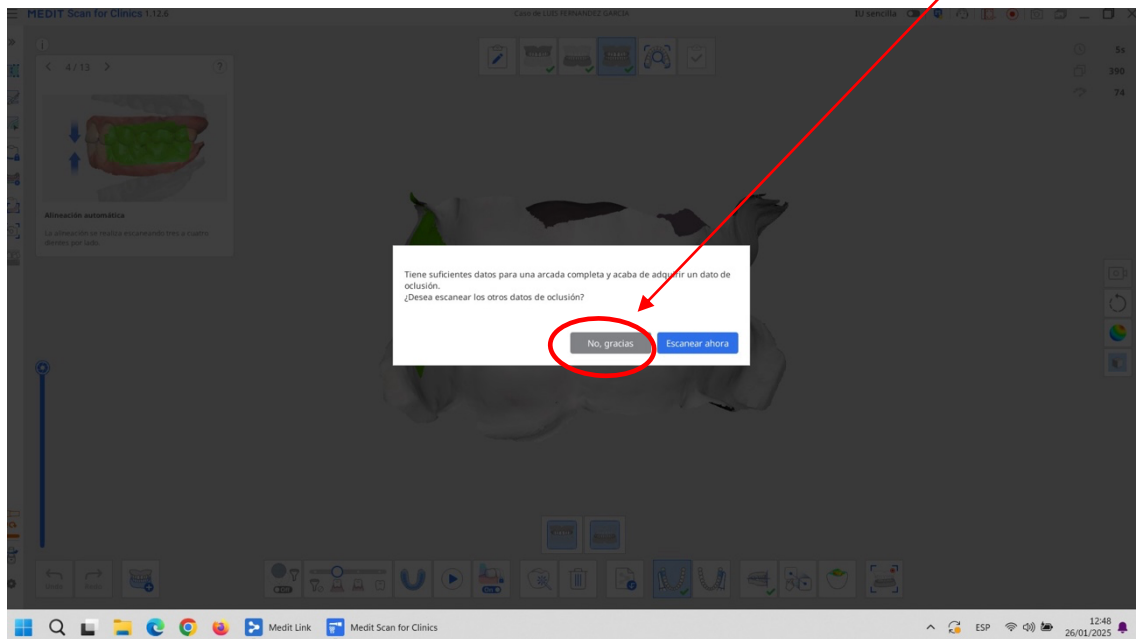


19. La siguiente ventana que nos aparece deberemos clicar en el primer dibujo.

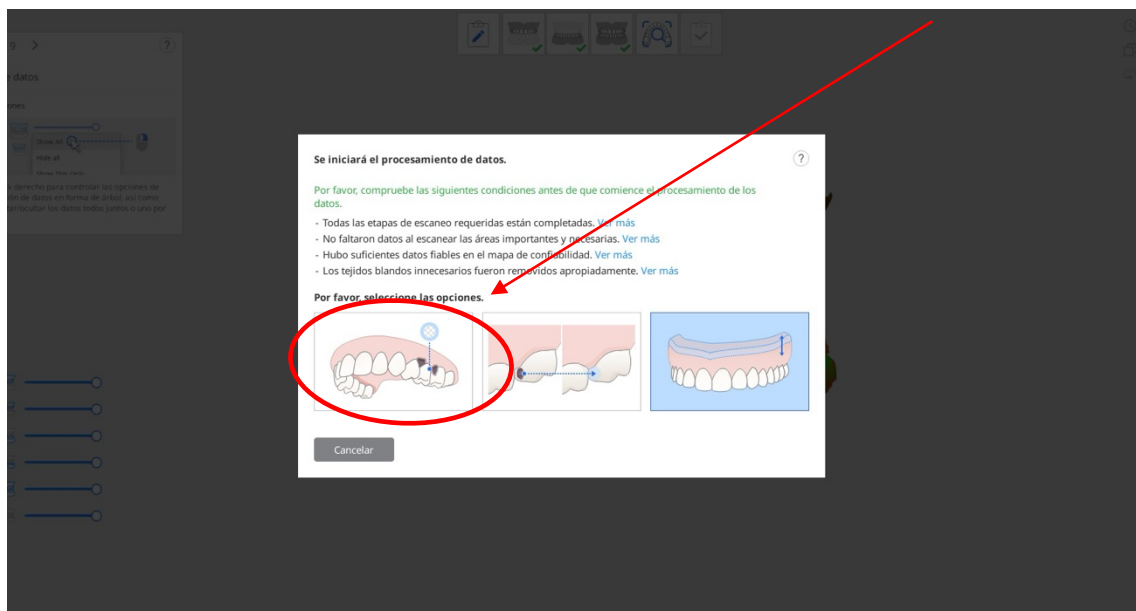

20. Una vez confirmado, el programa nos devolverá al inicio y buscaremos nuestro paciente, en el cual clicaremos y esperaremos a que se procese el escaneado

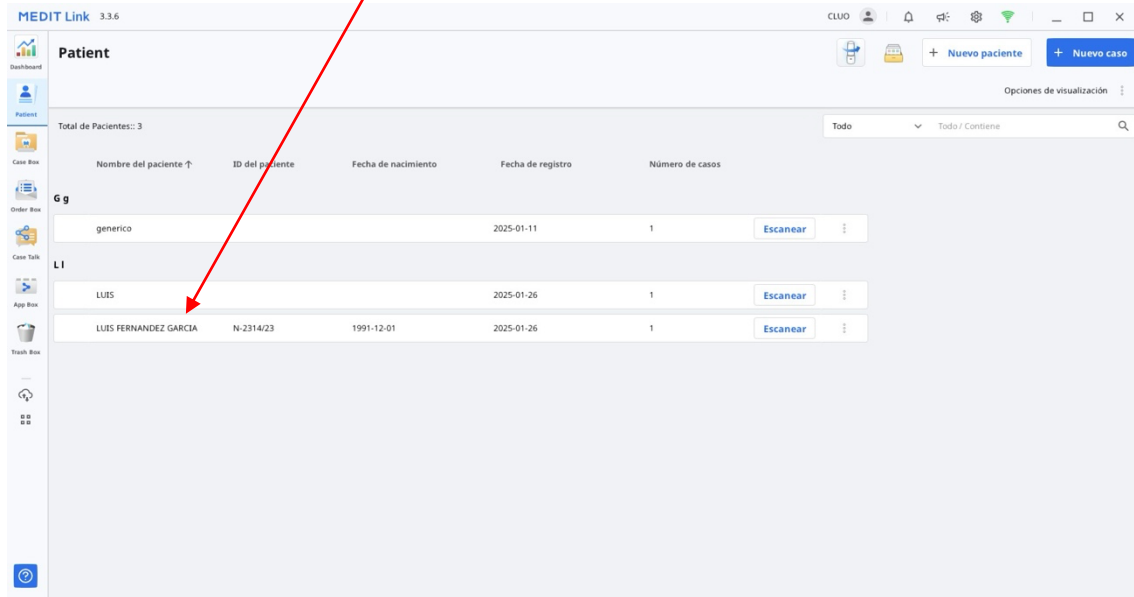


21. Al clicar en el paciente nos abrirá el icono “case box” de nuestro paciente

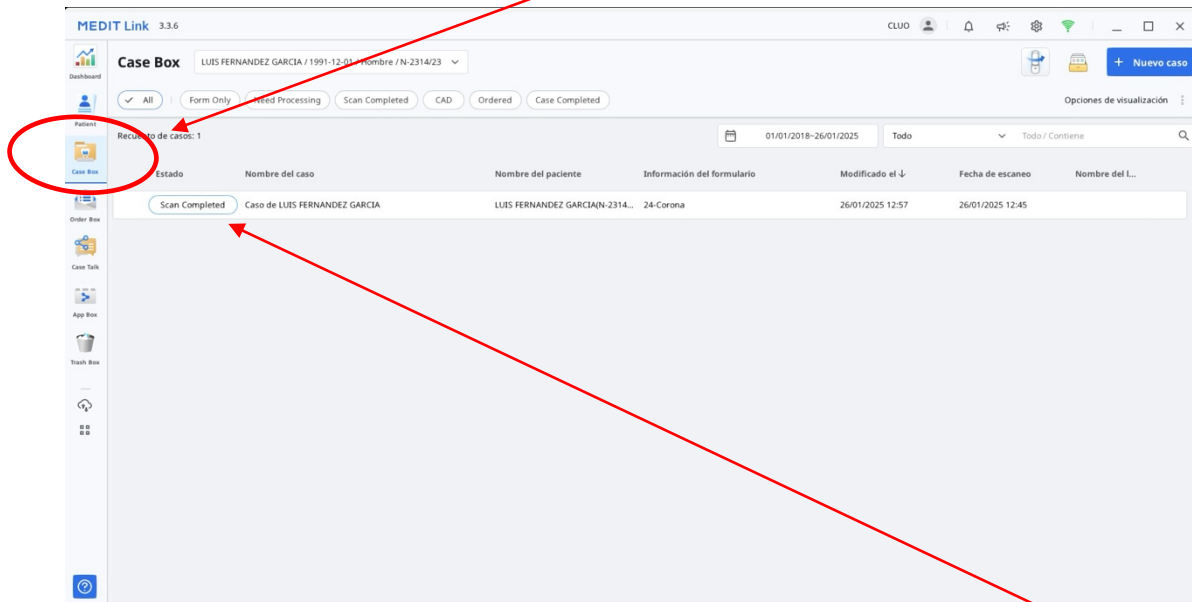


En el tenemos que esperar a que se genere el modelo digital y nos aparezca “Scan completed”. Una vez que nos aparezca clicaremos en el caso y se nos abrirá

22. Dentro de nuestro caso iniciaremos el pedido al laboratorio “Prescripción del laboratorio” clicando en “**Pedido**”

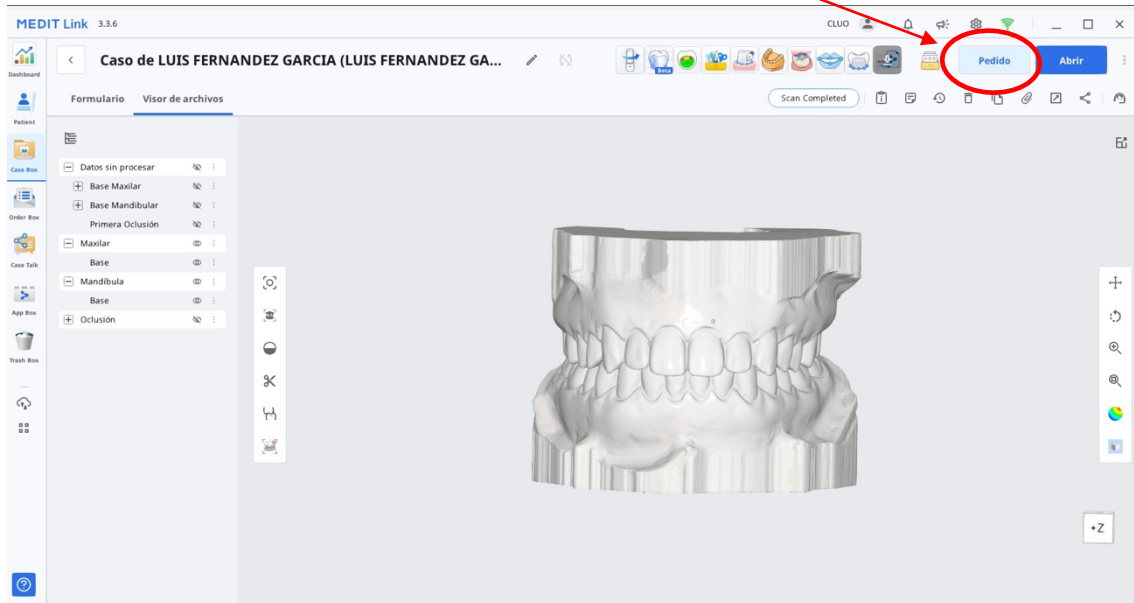


23. Nos saldrá una ventana con tres pestañas. La primera “**General**” tendremos que comprobar que estamos enviando la prescripción al **laboratorio DentalAstur**.

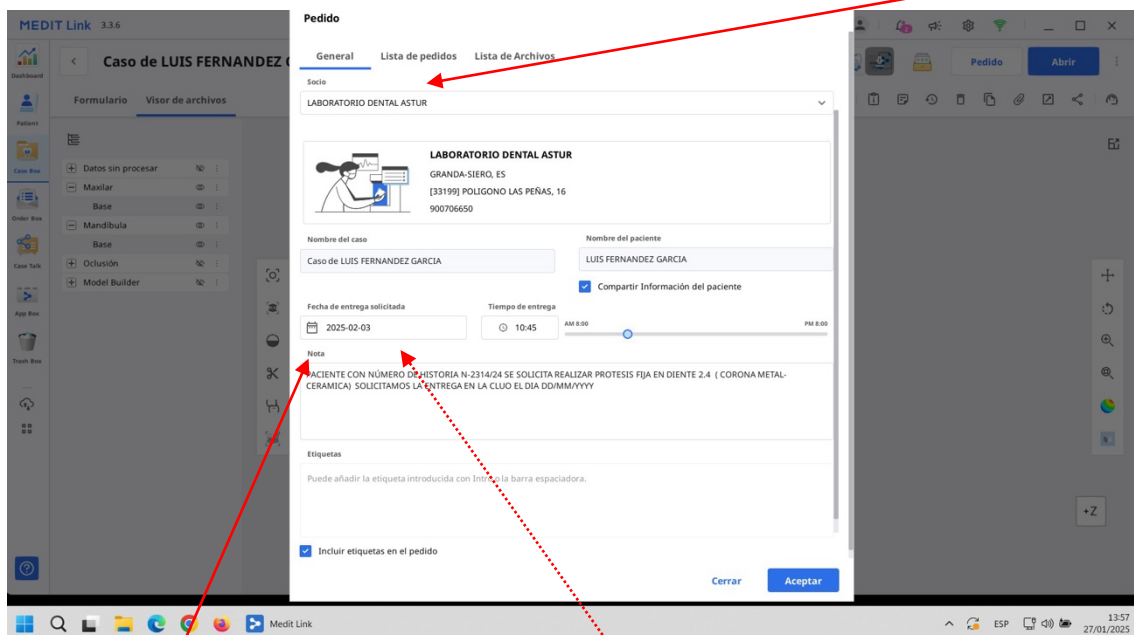


También tendremos que indicar la **fecha de entrega del trabajo** a la CLUO, así como “**LAS NOTAS**” que serán nuestra prescripción en ellas debemos incluir:

Número de historia del paciente (N-xxxx/xx), descripción del trabajo, la fecha de entrega en la CLUO, así como el número de orden (número de factura dada en administración de la CLUO) y el nombre y apellidos del alumno prescriptor.


24. La segunda pestaña nos hace referencia de **“la lista de pedidos”**, es decir, la lista de prescripciones de tratamientos que solicitamos al laboratorio. (hay que confirmar que estén correctas, en este caso corona metal cerámica en diente 2.4)

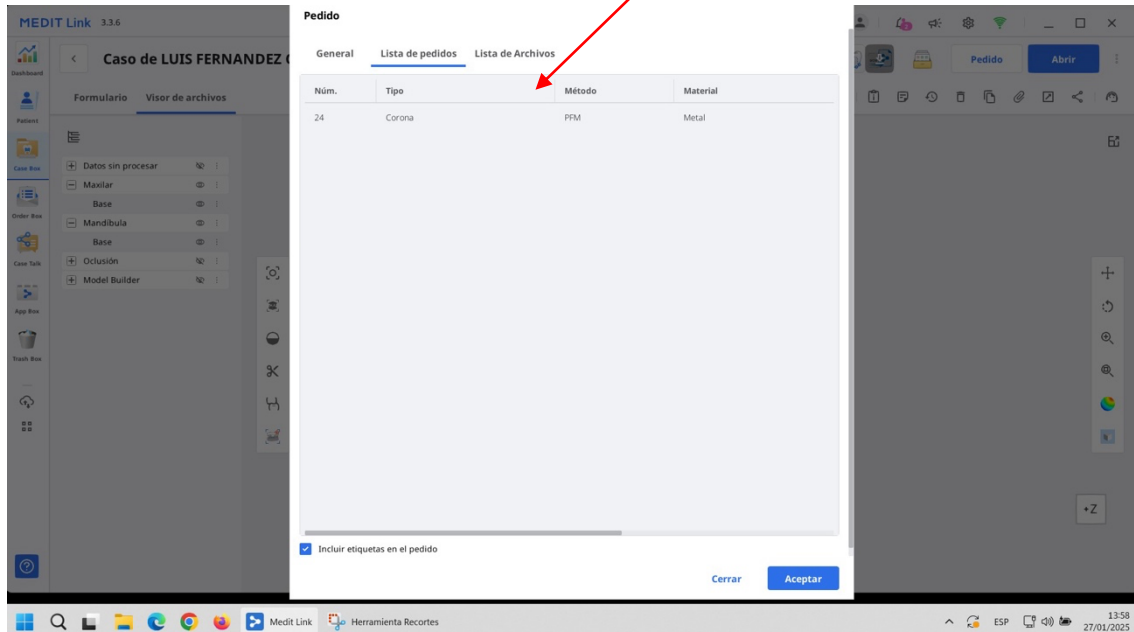

25. La última pestaña nos indica todos los archivos STL que vamos a enviar (en nuestro caso vemos que aparece escaneado maxilar, mandíbula, y oclusión). Todos los archivos deberían estar marcados con un  azul. Una vez confirmado le damos a **aceptar** y el trabajo estará enviado

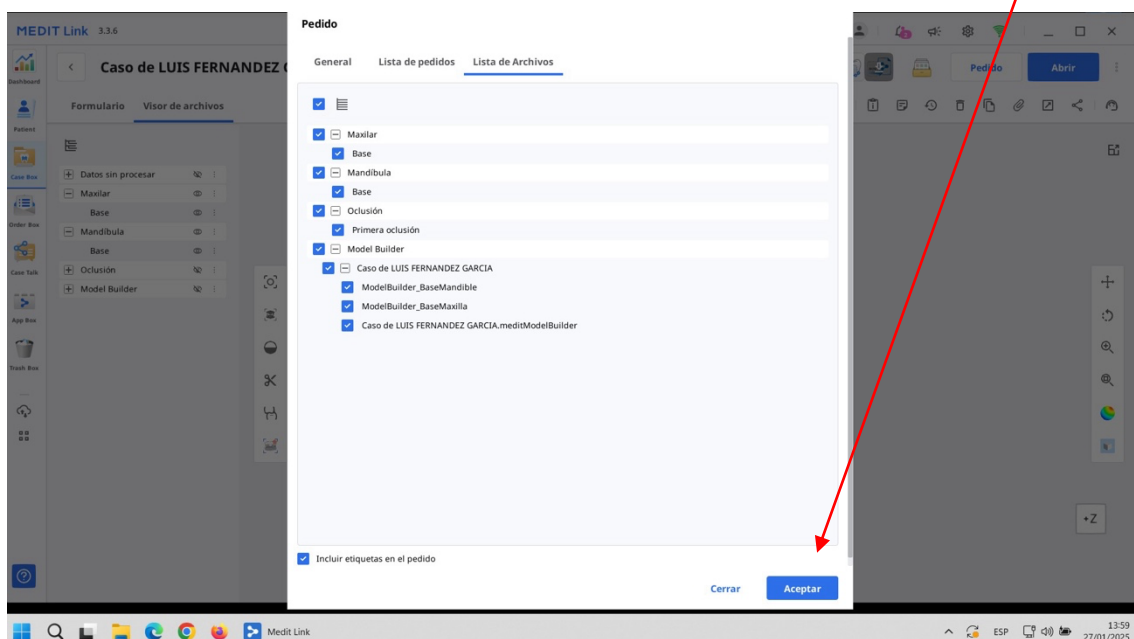

26. Una vez que acabemos de enviarlo para comprobar que se ha enviado correctamente acudiremos a la pestaña **"Order box"** y confirmaremos que nos aparece la solicitud de nuestro paciente.

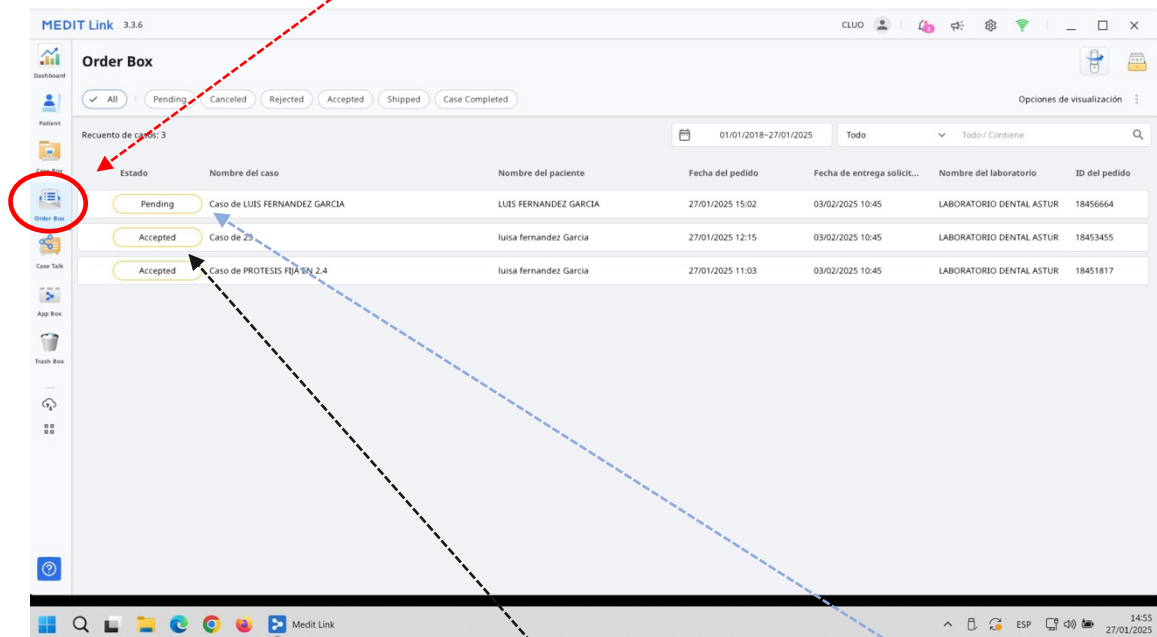

En un primer momento nos aparecerá pendiente de recepción **"Pending"**, hasta que el laboratorio lo recepcione y pase al estado **"accepted"** como vemos en el estado del segundo paciente del Order Box.

IMPORTANTE:

1. La primera vez que nos llegue el trabajo del laboratorio, estos nos enviarán la prueba de estructura metálica y el modelo zocalado para que lo montemos en el articulado artex para las futuras pruebas de bizcocho y de glaseado
2. Los pacientes que ya tienen presupuestada las prótesis fijas no se les cobrará el escaneo y realización de modelos digitales. Los pacientes con nuevos presupuestos desde el 29/01/2025 tendrán que incluirse el coste del tratamiento que se encuentra en **presupuestos → Prótesis fija → "escaneo intraoral y modelos digitales" (coste 25€)**