



Guía de Fotografía Clínica Dental para uso de la cámara de la CLUO

Equipo: Canon EOS R50 + Macro 85 mm + Flash MR-14EX II

OBJETIVO

Esta guía tiene como propósito estandarizar la toma de fotografías clínicas realizadas por los estudiantes, utilizando el equipo fotográfico asignado, con una configuración simplificada pero efectiva. Se busca garantizar imágenes de calidad diagnóstica, reproducibles y útiles tanto para el seguimiento clínico como para la documentación académica.

EQUIPO ASIGNADO


- **Cámara:** Canon EOS R50 (mirrorless)
- **Objetivo:** Macro 85 mm
- **Flash:** Canon Macro Ring Lite MR-14EX II (anular)
- **Accesorios:** Separadores, espejos intraorales, tarjeta de memoria, batería de la cámara, pilas del flash y fondo neutro (negro, blanco o gris)

CONFIGURACIÓN FIJA DE CÁMARA

Estos valores **NO DEBEN MODIFICARSE** salvo los indicados.

- **Modo de disparo:** Manual (M)
- **Velocidad de obturación:** 1/125
- **ISO:** 100
- **Flash:** Activado en modo ETTL
- **Apertura (F):** único valor que moveremos
 - f/11 para fotografías extraorales
 - f/29 para fotografías intraorales

La apertura se ajusta directamente desde la **pantalla táctil** de la cámara, pulsando en el recuadro dentro del círculo rojo.

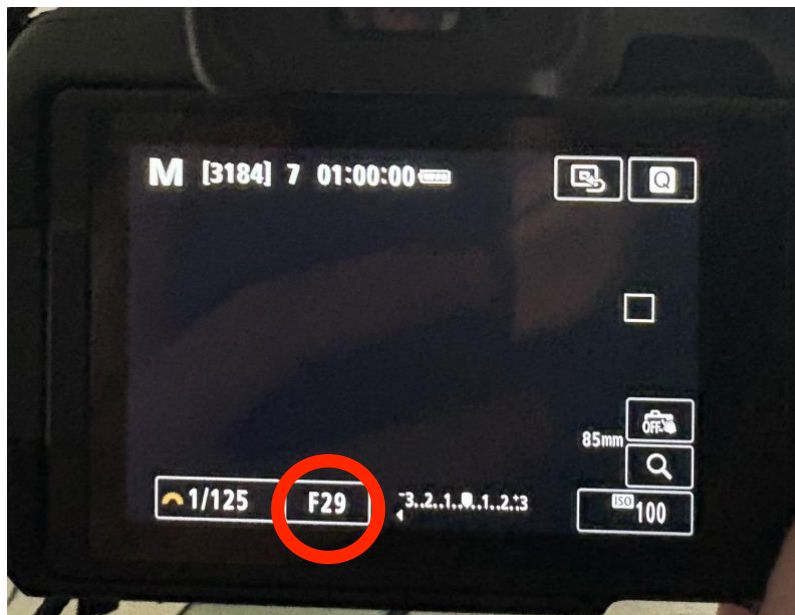

COMPENSACIÓN DEL FLASH

El flash funciona en modo ETTL (automático), pero permite ajustar la exposición desde -3 hasta +3 en pasos de 1/3.

Este ajuste **es el único que el alumno podrá modificar durante el uso.**

La compensación se ajusta desde el panel del flash utilizando el botón central (SEL/SET) y la rueda que rodea al botón. Se indica con un círculo rojo en la imagen.




- Si la imagen está oscura → subir exposición (+1, +1.3, +2...)
- Si la imagen está muy clara → bajar exposición (-1, -1.3, -2...)

FOTOGRAFÍAS OBLIGATORIAS

FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES (4 FOTOS)


- Apertura: f/11
- Enfoque en los ojos
- Fondo neutro y mate
- La fotografía debe incluir cuello y parte superior del tórax
- En sonrisa, se debe pedir una expresión natural (no una sonrisa social)

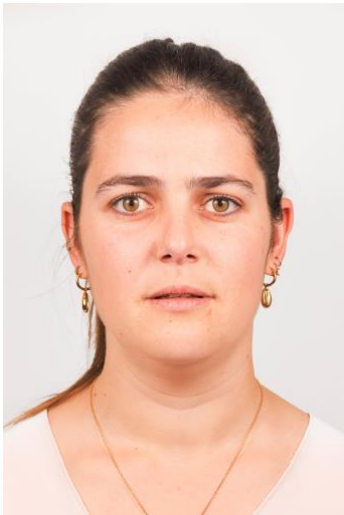

Frontal en reposo



Frontal en sonrisa franca

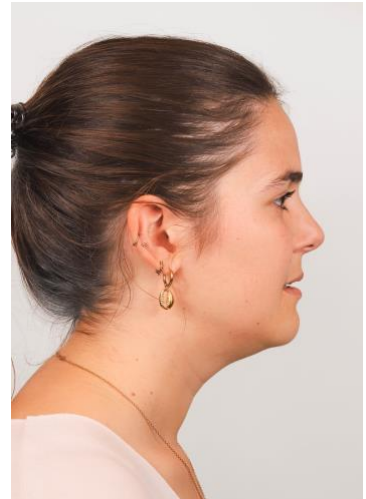

Perfil en reposo



Frontal con separadores

FOTOGRAFIAS INTRAORALES (5 FOTOS)

- Apertura: f/29
- Enfoque en caninos o incisivos centrales
- Cavidad oral limpia y sin saliva visible
- Separadores bien colocados, tirando hacia los lados y hacia adelante
- Para oclusales, el paciente debe estar reclinado, se debe usar espejo y retirar el labio con el separador
- Las imágenes con espejo deben voltearse horizontalmente durante el postprocesado



1. Frontal

2. Lateral derecha




3. Lateral izquierda





4. Oclusal superior

5. Oclusal inferior

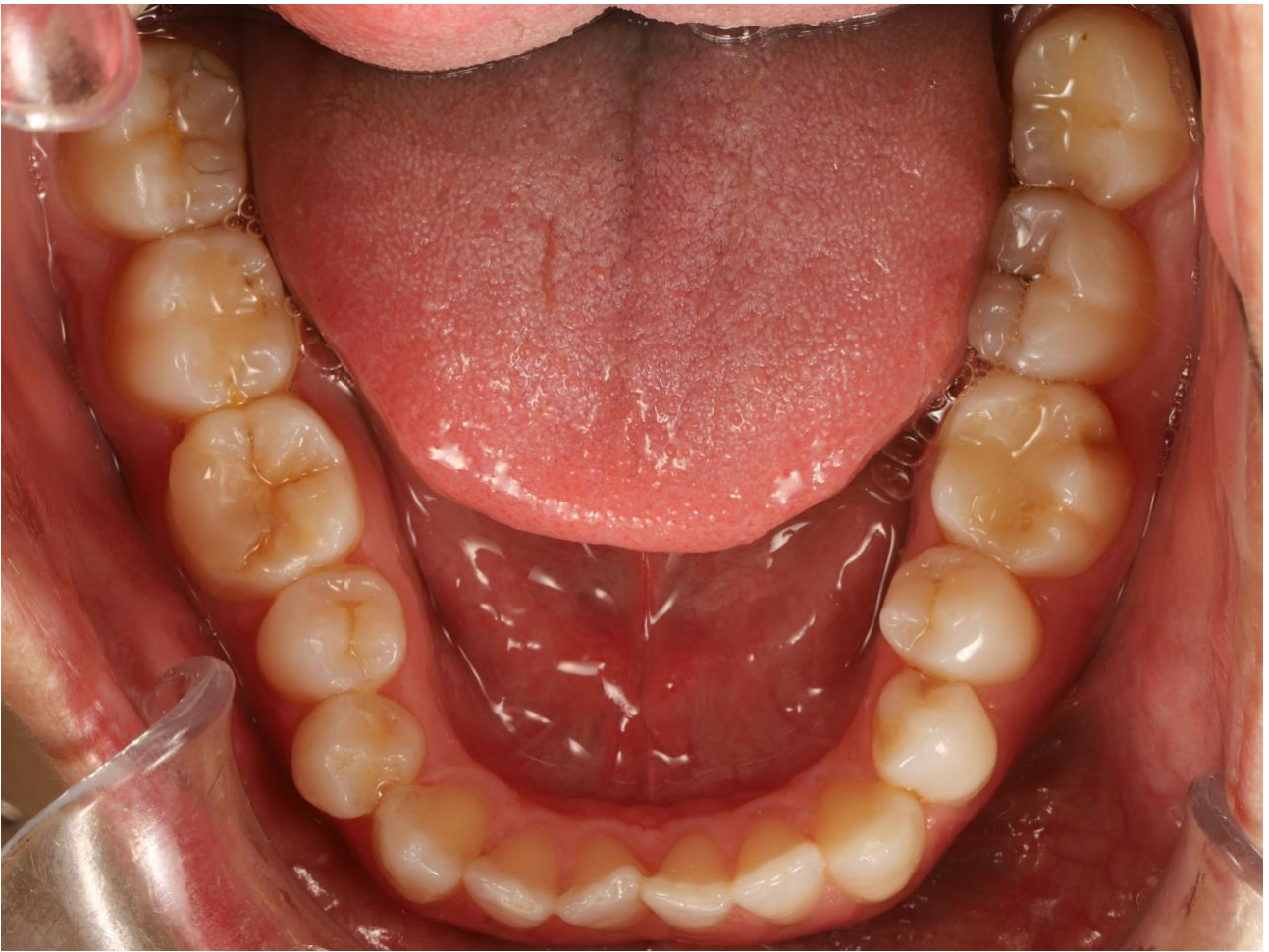

NOMBRES DE ARCHIVOS

Las imágenes deben ser renombradas de forma clara y ordenada antes de ser entregadas o guardadas.

Ejemplos:

- HC 1703 Frontal Reposo
- HC 1703 Lateral Izquierda

Las fotos deben guardarse en una **carpeta con el número de historia o nombre del paciente**.

RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO AL DEVOLVER EL EQUIPO

Antes de devolver la cámara al almacén, el alumno debe asegurarse de lo siguiente:

Energía

- La batería de la cámara está completamente cargada
- Las pilas del flash están cargadas o han sido reemplazadas por otras cargadas

Memoria

- Las imágenes han sido copiadas correctamente y entregadas
- La tarjeta de memoria ha sido formateada desde la cámara

Higiene y orden

- Separadores y espejos han sido desechados o esterilizados según el caso
- El objetivo y la cámara están limpios
- No hay saliva, huellas ni polvo en el equipo

PROTOCOLO FLUJO DE TRABAJO DE FOTOGRAFÍA DENTAL CLUO

