



CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

TRATAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIAL: ESTERILIZACIÓN Y ALMACEN

CUBETAS DE IMPRESIÓN:

- Nada más vaciadas, las cubetas de impresión serán sometidas por los alumnos, en la Sala de Yesos, a eliminación del material de impresión.
- Seguidamente serán lavadas e introducidas limpias y secas en una bolsa de esterilización de longitud suficiente (**deben quedar al menos 5 cm de bolsa libre en el extremo para poder cerrarla con la selladora en la central de esterilización**)
- La bolsa deberá estar **rotulada a lápiz** con el N.º de casilla en la zona del borde sellado de la bolsa, para evitar la posible entrada de grafito al interior de la bolsa durante la esterilización. **No cerrar la bolsa.**
- Trasladar a la Unidad Central de Esterilización el material por la casilla de sucio, acompañadas de la **Ficha de Control** de material debidamente cumplimentada (original y copia amarilla).

TURBINAS Y CONTRAÁNGULOS:

Los propios alumnos se encargarán de:

- Limpiarlas con toallita desinfectante, eliminando cualquier resto de sangre, saliva, etc.
- Engrasarlas/ Lubricarlas antes de su embolsado, eliminando el exceso de lubricante.
- Introducir las limpias y secas en una bolsa de esterilización de longitud suficiente (**dejar al menos 5 cm para el sellado**), **rotulada a lápiz** con el nº de casilla en la zona del borde sellado. No cerrar la bolsa.
- Trasladarlos por la casilla de sucio junto con la **Ficha de Control** (original y copia amarilla).

INSTRUMENTAL DE MANO: (espejos, sondas, pinzas, curetas, excavadores, tijeras, fórceps, etc.)

- Inmediatamente después de su uso, en el mismo sitio donde fue utilizado el material, realizar un prelavado con agua corriente para evitar que la biocarga se seque.
- Depositar el instrumental en la cubeta con agua tibia y detergente enzimático o tensioactivo con pH neutro (seguir las instrucciones de uso del detergente trienzimático).

***Nota:** Esta disolución de agua con la disolución adecuada de detergente (ver instrucciones en etiqueta del producto ya que depende de cada proveedor) debe cambiarse diariamente y con mayor frecuencia según su uso y la suciedad del instrumental.*

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

- Enjuagar con agua y secar con papel de celulosa.
- Organizar el instrumental en casetes identificadas con una chapa grabada con el nº casilla. Las tijeras, fórceps, pinzas u otro instrumentos articulados deben colocarse abiertos.
- Introducir el instrumental en una bolsa nueva y seca, dejando al menos **5 cm para el sellado**. No cerrar la bolsa. **Rotular con lápiz** con el N.º de casilla.
- Entregar a través de la casilla de sucio con la **Ficha de Control** debidamente cumplimentada.

FICHA DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN



Universidad de Oviedo
Universidá d'Oviéu
University of Oviedo

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA CLUO FICHA DE CONTROL

CASILLA:

Nombre:

Curso:

Fecha de entrada:

Fecha de salida:

A rellenar por el solicitante		A rellenar por el personal	
Material	Nº	Confirma entrada	Confirma salida
Para termodesinfección en lavadora:			
• Cassetes con material para lavar			
Embolsado para esterilizar			
• Cavitrones			
• Turbinas			
• Contraángulos			
• Otros (indicar nº de bolsas)			
TOTAL BOLSAS:			
Datos de Procesado:			
Autoclave:		Nº de ciclo:	
Controles:			
Físico ☐	Bowie-Dick ☐	Químico ☐	Biológico ☐
Observaciones:			
✓ Esta ficha y su copia amarilla, debidamente cumplimentadas con los datos de material y solicitante del servicio, deben introducirse en el cajetín de sucio acompañando siempre al instrumental que en él se deposite para su lavado y/o esterilización. Cuando retire el material limpio recibirá la copia amarilla con la confirmación de entrada y salida del personal de la Central de esterilización y los datos de procesado del instrumental para su trazabilidad.			

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

PROCESAMIENTO, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN

En la Unidad de Esterilización se realizará el procesamiento indicado a cada instrumental: revisión, envasado casetes/sellado bolsas, termodesinfección, esterilización y empaquetado material estéril.

- Las bolsas con instrumental, aparatología rotatoria o cubetas de impresión serán selladas, rotuladas y esterilizadas.
- Las casetes se someterán a lavado y desinfección en termodesinfectadora (si así se indica en la Ficha de Control), empaquetado en tejido sin tejer y autoclavado.
- El personal completará la **FICHA DE CONTROL** indicando datos de procesamiento y observaciones. Si no cumple los requisitos, el material se devolverá sin esterilizar, con indicación del motivo.

La Ficha de Control se archivará en la *Unidad de Esterilización* y la copia amarilla se devolverá al alumno con el instrumental estéril y los datos de procesado, junto con el material empaquetado, a través de la casilla de limpio.

FICHA DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL SIN ESTERILIZAR

CASILLA:

NOMBRE:

CURSO:

Fecha de entrada:

Fecha de salida:

Relación de material que se devuelve:

CANTIDAD	ARTÍCULO	MOTIVO DEVOLUCIÓN

MOTIVO de la devolución:

- ☐ Se trata de un material etiquetado o marcado como un solo uso o no reutilizable.
- ☐ El producto no es esterilizable por vapor.
- ☐ El material tiene suciedad / deterioro visible.
- ☐ Otro:

Persona responsable de la devolución:

Nota: Para cualquier aclaración dirigirse a la Central de Esterilización de la Clínica Universitaria de Odontología.

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

RECOGIDA Y ENTREGA DE MATERIAL

- El material limpio y estéril se recoge en la "casilla de limpio" junto a la copia amarilla de la FICHA DE CONTROL
- No abrir el envoltorio hasta su uso. Una vez abierto el envoltorio el instrumental deja de estar estéril.
- Cada casete y paquete/lote llevará una etiqueta con datos de procesamiento y fecha de esterilización.
- Retirar el material procesado para liberar espacio para futuros procesados.

DURACION DE LA ESTERILIDAD:

Unidad de Esterilización garantiza la esterilización entre 6 y 12 meses, depende de múltiples factores: condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte, etc.

Una bolsa o paquete que haya sido abierto o esté roto, pinchado o deteriorado deja de estar estéril.

INCIDENCIAS: Cualquier deterioro o extravío de material deberá ser comunicado a la Unidad Administrativa del centro en el plazo máximo de 24 horas.

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

CONDICIONES GENERALES DE DEVOLUCION DE MATERIAL (ALMACEN ÁREA CLÍNICA)

- Todo el material prestado deberá ser devuelto **limpio, desinfectado y completamente seco**.
- La **solución desinfectante/enzimática** debe ser **renovada diariamente por el alumno/a**.
- Las bolsas deben ser **nuevas y del tamaño adecuado, 2 ó 3cm de espacio libre** alrededor del instrumental y **al menos 5 cm** para el sellado.
- **No se aceptarán bolsas rotas, reutilizadas o húmedas**. Las bolsas usadas **no pueden volver a esterilizarse**.
- Las bolsas deben estar **rotuladas con lápiz** en el **extremo sobrante del área de sellado**.
- El **instrumental articulado** debe embolsarse en **posición abierta**.
- Los **instrumentos rotatorios** deberán ser **engrasados antes del embolsado**.
- Si el material tiene nombre o un número limitado de usos, esta información debe estar claramente indicada en la nueva bolsa. Ejemplos: material de endodoncia, forceps, fresas...

Excepciones de Embolsado

- Los **clamps** se prestarán **sin bolsa**, pero su devolución **sí requiere embolsado individual**.
La bolsa deberá estar **rotulada** con el **número o letra identificativa** del clamp.

 El autoclave **NO limpia**. Si el material entra sucio, sale contaminado, compromete todo el proceso y pone en riesgo tanto al paciente como al equipo humano.

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE DESINFECCION Y EMBOLSADO DE LIMAS


- Antes del embolsado, es necesario frotar las limas con un desinfectante o jabón y un cepillo (cada box debe disponer del suyo). Tras este proceso, completar la desinfección pasando una gasa impregnada en alcohol. Asegúrese de que las limas estén completamente secas antes de proceder al embolsado.
- Una vez secas, embolsar las limas indicando el número de kit al que pertenecen y el número de usos.

Nota:


- El número de kit (del **kit 1 al kit 6**), los milímetros (21, 25, 31mm) y el número de usos están indicados en la parte posterior de cada bolsa de limas entregada desde el almacén
- Cuando se devuelva el material el **número de usos** será siempre **uno más** que el número de usos que figura en la bolsa donde se encuentran las limas.

MATERIAL ENDODONCIA – REQUISITOS ESPECIFICOS

Kit limas

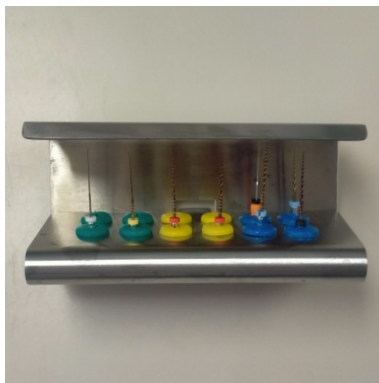

Nº de kit, usos y milímetros

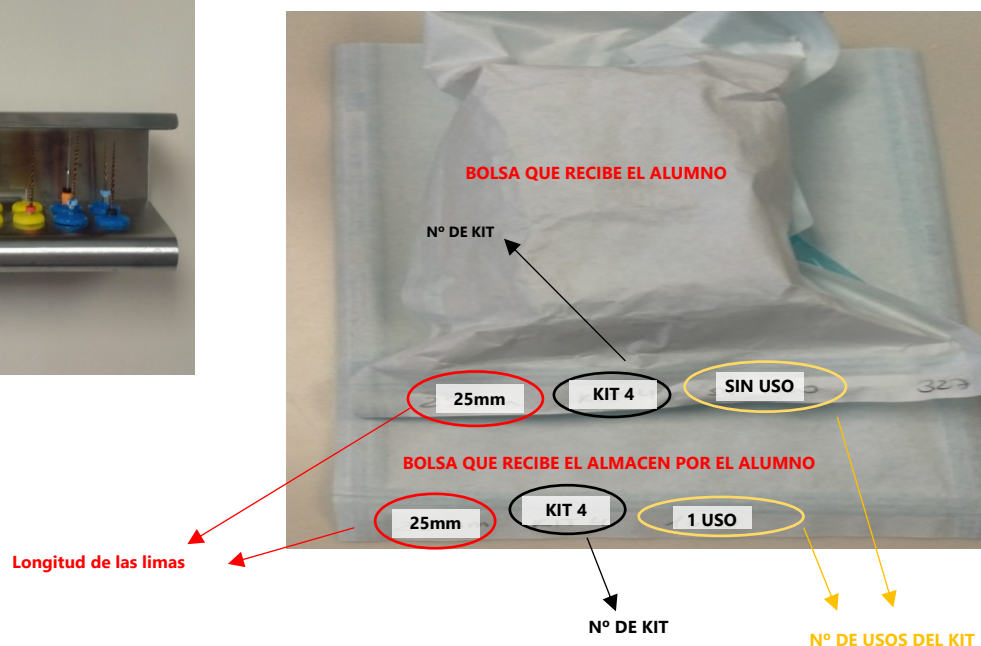

Nota: La bolsa de vuelta al almacén debe tener un uso más del que vino

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA


Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

Endomotor



- El cabezal contra-ángulo debe estar previamente engrasado.
- Clip o separador labial del localizador.

FI-E – Pieza de mano para inyección eléctrica de gutapercha

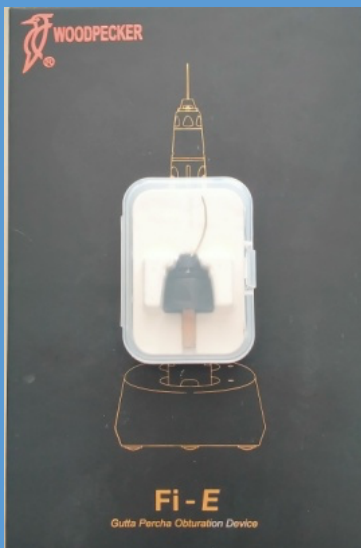

- Esterilizar la **aguja de inyección**.
- Incluir las **puntas de obturación** (*Pluggers / Tips*).
- Incluir los **protectores de silicona desmontables**.

FI-P – Pieza de mano para condensación vertical




- Esterilizar la **punta de condensación**.


CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico

ERRORES MÁS COMUNES

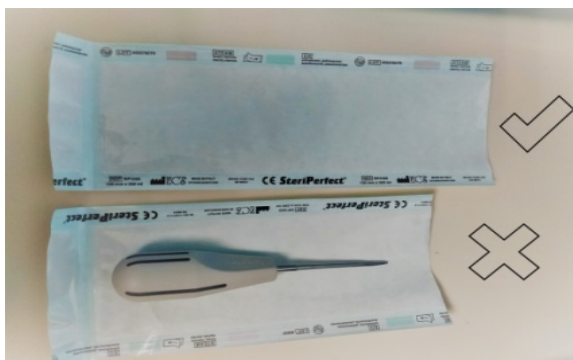


Bolsas cortas, imposible correcto sellado

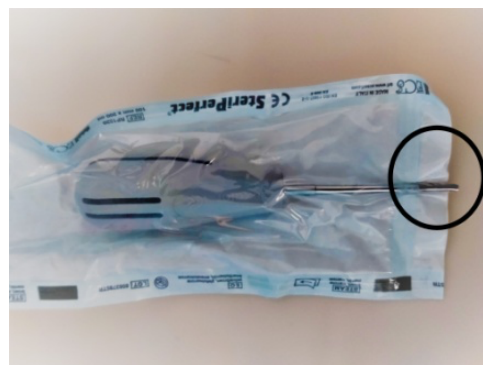

Bolsa perforada



Bolsa muy arrugada, sucia y reutilizada

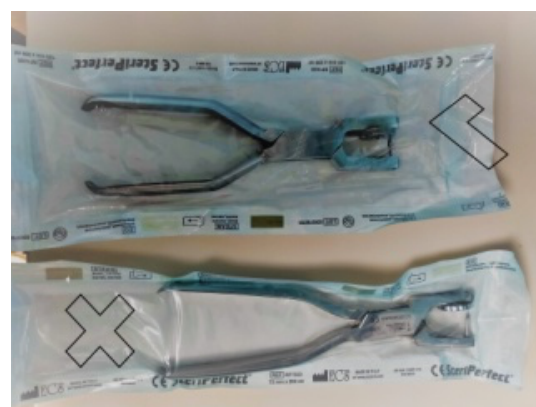

Bolsa estrecha



Bolsa mojada



Bolsa con restos biológicos

CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGÍA

Unidad de Esterilización y Almacén Clínico



Artículo mal cerrado



Bolsa sucia



Tamaño inapropiado de la bolsa